




Technische Daten

Phonak ComPilot Air II

Der ComPilot Air II empfängt Audiosignale von verschiedenen Bluetooth®-Geräten und überträgt diese drahtlos an Phonak Hörgeräte. Nahezu jedes bluetoothfähige Audiogerät und Telefon wird unterstützt. Der ComPilot Air II kann auch als Fernsteuerung für die Hörgeräte verwendet werden.

Beschreibung

- 1 Haupttaste
- 2 Lautstärke erhöhen/reduzieren
- 3 Ein-/Aus-Schalter
- 4 Mikrofonöffnung
- 5 Ladebuchse (mini-USB)
- 6 Statusanzeige
- 7 Öse für Tragekordel
- 8 Halteclip

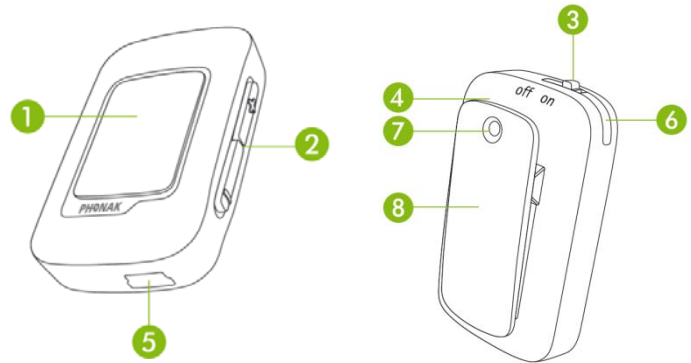

Funktionen

- Keine Induktionsschleufe
- Keine direkte Sicht auf die Hörgeräte notwendig
- Bis zu 4 Stunden Streamingzeit
- Einfache Fernsteuerung
- Mit Phonak RemoteControl App kompatibel










Zubehör

- Universal-Netzgerät, mini-USB
- Phonak TVLink II
- 12 V-Auto-Ladegerät, mini-USB

Allgemein

Maße (L x B x H):	54 x 34 x 12/19 mm
Gewicht:	24 g
Farbe:	Champagner
Betriebsbedingungen:	0°C - 40°C (+32° bis +104° Fahrenheit) / < 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend)
Transport- und Lagerbedingungen:	-20 °C bis +60 °C (-4° bis +140° Fahrenheit) / < 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend)

Statusanzeige

Testton wird abgespielt	 Konstant violett
Bluetooth-Streaming	 Konstant blau
Kopplungsmodus	 Blinkt schnell blau
Einschalten	 2 Sekunden grün
Ausschalten	 2 Sekunden rot
Akku wird geladen	 Konstant rot
Akku voll und Ladegerät angeschlossen	 Konstant grün
<10% Akku-Restladung	 Blinkt kurz rot
Sperre aktivieren/deaktivieren	 Blinkt dreifach rot (gesperrt)
	 Blinkt dreifach grün (entsperrt)



Strom-und Akkudaten

Batterie:	Lithium-Polymer, 3,7 V Gleichstrom
Ladezeit:	2 Stunden Die Ladezeit hängt vom anfänglichen Akkustatus ab. Volle Leistung wird nach 3 vollständigen Lade- und Entladezyklen erreicht.
Kapazität:	325 mAh (typ.)
Betriebszeit:	Bis zu 4 Stunden Bluetooth-Streaming 1 Woche im eingeschalteten Zustand, Bluetooth auf Standby
Lade-Eingang:	Typ: Gleichspannung, stabilisiert 5 V +/- 5 % Max. Stromstärke: 500 mA Der Akku kann nicht überladen werden. Während des Ladevorgangs kann das Gerät warm werden. Wichtiger Hinweis: Es wird empfohlen, ausschließlich das Original-Ladegerät von Phonak zu verwenden.

Audiodaten

Unterstützter Audioeingang:	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth Audio (Stereo)• Bluetooth Telefon
Audioqualität:	Stereo / 22 kHz Musterfrequenz
Audiobandbreite:	20 Hz – 10 kHz

Bluetooth

Unterstützte Bluetooth Profile:	<ul style="list-style-type: none">• Headset Profile (HSP)• Handsfree Profile (HFP)• Low Energy (Bluetooth Smart) GATT Profile• Advanced Audio Distribution Profil (A2DP)• Audio Video Remote Control Profil AVRCP• Phone Book Access Profile (PBAP)
Bluetooth-Bereich:	10 m (Klasse 2)
Bluetooth-Kompatibilität:	Bluetooth Version 4.1 + EDR / +LE
Max. Anzahl gekoppelter Geräte:	6
Maximale Anzahl Simultan aktiver Profile:	<ul style="list-style-type: none">• 3 A2DP• 2 HSP/HFP (in der Regel 2 Mobiltelefone und 1 TVLink II oder RemoteMic)
QDID:	



Der Begriff Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc., jegliche Verwendung dieser Marken durch Phonak erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind die ihrer jeweiligen Inhaber.

Funkdaten

Typ:	Integriert, induktiv
Betriebsfrequenz:	10,6 MHz
Belegte Bandbreite (99 % Bandbreite):	488 kHz
Modulation:	8-DPSK
Kanal:	Einkanalfunk
Magnetfeldstärke bei 10 m:	< -11,5 dBµA/m
Reichweite zu Hörgerät:	bis zu 40 cm
Trageoption:	Mit Clip an Kleidung befestigt
Anwendungsfall:	Audio-Streaming, Telefonanruf, Fernsteuerung

Angewandte Standards:

Europa	ETSI EN 300 330 (HiBAN) ETSI EN 300 328 (Bluetooth) EN/IEC 60601-1-2 EN 301489-1,-3,-17 EN/IEC 60601-1 EN 60950-1 EN 62479
USA	47 CFR Part 15.209 (HiBAN) 47 CFR Part 15.247 (Bluetooth) FCC ID: KWC-CPAIR2
Kanada	RSS-210 (Issue 8) Annex 1 (HiBAN) RSS-210 (Issue 8) Annex 8 (Bluetooth) IC: 2262A-CPAIR2
Japan	EWPE (HiBAN), ARIB-T66 (Bluetooth)

Kompatibilität mit drahtlosen Hörgeräten von Phonak

Drahtlose Phonak Venture Hörgeräte erforderlich.

Vollständige Liste der kompatiblen Hörgeräte auf www.phonakpro.com.