



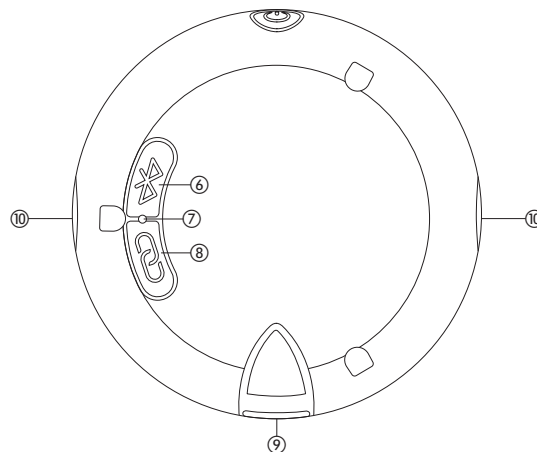

Roger Select ist ein vielseitiges Mikrofon, das sich ideal für Gruppengespräche in geräuschvollen Umgebungen eignet. In der Tischmitte platziert, richtet es sich automatisch auf die sprechende Person aus und wechselt übergangslos zwischen den Gesprächspartnern. Wenn mehrere Gespräche gleichzeitig stattfinden, kann der Benutzer manuell das Gespräch auswählen, das er fokussieren möchte. Zudem kann es den Ton von Multimedia-Geräten, z.B. Fernsehern, an die Hörgeräte übertragen und bietet Bluetooth-Anbindung für Gespräche über Mobiltelefone.

Beschreibung

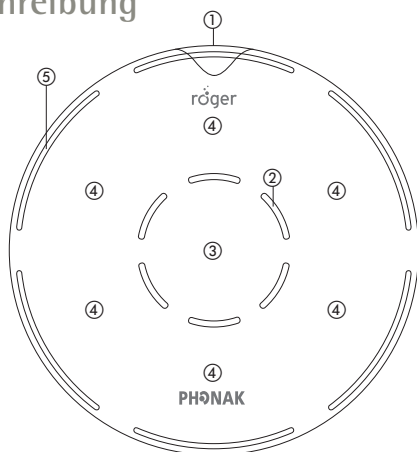

- 1) Ein/Aus-Taste inkl. Akku-Statusanzeige
- 2) Mikrofone und mittlere Statusanzeigen
- 3) Mittlere Touch-Taste
- 4) Sechs Touch-Steuerungstasten
- 5) Statusanzeigen (Mikrofonmodus)

- 6) Bluetooth-Taste
- 7) Statusanzeige (Rückseite)
- 8) Connect-Taste
- 9) micro-USB-Buchse
- 10) Anschlüsse für Umhängekordel und Clip

Roger Select Funktionen

- Bewährte Roger Sprache-im-Lärm Leistung
- MultiBeam Technologie
- Tischmodus
- Auswahlmodus
- Ansteckmodus
- Audioeingang für Multimedia
- Bluetooth® zum Telefonieren
- Mehrere Mikrofone in einem Netzwerk verwendbar (MultiTalker Netzwerk)

Allgemein

Maße (Ø x H):	55 x 12 mm
Gewicht:	28 g
Farboptionen:	Champagner, Pearl White, Graphitgrau
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:	Netzteil mit USB-Kabel, Docking Station, optisches Audiokabel, Clip, Umhängekordel, Beutel
Betriebsbedingungen:	0°C bis 40°C (+32°F bis +104°F). Relative Luftfeuchtigkeit <90% (nicht-kondensierend)
Transport- und Lagerbedingungen:	-20°C bis 60°C (-4°F bis +140°F). Relative Luftfeuchtigkeit von <90 % über einen längeren Zeitraum

Netzkabel

Typ:	Gleichspannung, stabilisiert
Eingangsspannung:	100 - 240 V
Ausgangsspannung:	5 V Gleichspannung
Max. Stromstärke:	1,0 A
Steckverbinder:	micro-USB
Wichtiger Hinweis:	Nur das Original-Netzteil (USB) von Phonak verwenden 5 V Gleichspannung, > 500 mA

Batterie

Typ:	Lithium-Polymer
Kapazität:	400 mAh
Spannung:	3,7 V
Betriebszeit:	8 Stunden

Audiodaten

Audioeingang:	Analog via micro-USB-Buchse
Audiobandbreite:	100 Hz - 7,3 kHz


Mikrofoneigenschaften

Anzahl der Mikrofone:	3
Mikrofonmodi:	Tischmodus, Auswahlmodus, Ansteckmodus

Radio Merkmale

Streaming-Technologie:	Roger-Technologie
Frequenzbereich:	2,4 GHz ISM-Band einschl. adaptives automatisches Frequenzspringen
HF Leistung:	100 mW max.
Betriebsreichweite:	10 Meter (normale Bedingungen) 20 Meter (ideale Bedingungen)

Docking Station

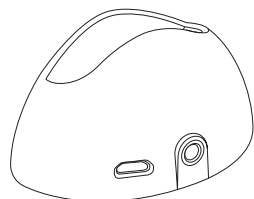

Audioeingang (3,5-mm-Buchse):	- Analog
-------------------------------	----------

Empfängerkompatibilität

Kompatible Roger-Empfänger:	Alle persönlichen Roger-Empfänger
Anzahl Roger-Empfänger:	Unbegrenzt

Mikrofonkompatibilität (MultiTalker Netzwerk)

Roger Select funktioniert in einem MultiTalker Netzwerk nur im Ansteckmodus (um den Hals hängend oder an der Kleidung angesteckt).

Kompatible Roger-Mikrofone:	Roger Table Mic II Roger Select Roger On Roger On iN Roger Select iN Roger Table Mic II iN Roger Clip-On Mic
Anzahl Roger-Mikrofone:	Bis zu 10

Angewandte Standards

Europa	EN 300 328 EN 301 489 EN 62368-1 IEC/EN 62311
Kanada	RSS-247 RSS-102
Japan	ARIB-T66
USA	CFR 47, Teil 15.247 FCC OET Bulletin No.65

Bluetooth zum Telefonieren

Bluetooth-Bereich:	3 Meter (Klasse 2)
Unterstützte Bluetooth-Profile:	Headset Profile (HSP) Handsfree Profile (HFP)
Bluetooth-Kompatibilität:	Bluetooth Version 4.0
Max. Anzahl gekoppelter Telefone:	8
Max. Anzahl verbundener Telefone:	2



Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc., jegliche Verwendung dieser Marken durch Phonak erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind die ihrer jeweiligen Inhaber.