

耳かけ型補聴器： フォナック スカイ ルミティ ●

プロダクトインフォメーション

フォナック スカイ ルミティは、軽度から重度難聴を対象とした幅広くご利用になれる
こども用BTEタイプの補聴器で、4つのクラスと4種類のタイプが用意されています。
フォナック スマートスピーチ テクノロジーが搭載されたスカイ ルミティ補聴器は、
最新プラットフォーム“フォナック ルミティ”がもたらす「ことばの理解」を望む
お子さまに最適なソリューションです。



製品概要



スカイ L-M
スカイ L-M
トライアル

スカイ L-PR
スカイ L-PR
トライアル

スカイ L-SP
スカイ L-SP
トライアル

スカイ L-UP
スカイ L-UP
トライアル

電機音響的性能はJIS C 5512:2015による公称値		L90/L70/L50/L30	L90/L70/L50/L30	L90/L70/L50/L30	L90/L70/L50/L30
電池サイズ		PR41(312)	リチウムイオン電池	PR48(13)	PR44(675)
お知らせLEDランプ		●	●	●	●
CROS Lとの互換性			●		
多機能ボタン		●	●	●	●
Tコイル		●		●	●
Bluetooth®		●	●	●	●
ナノ コーティング		●	●	●	●
国際保護等級IP規格		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
サイズ	縦 x 幅 x 奥行	31.3 x 14.1 x 7.3 mm	36.7 x 16.4 x 8.5 mm	40.0 x 16.9 x 8.5 mm	42.6 x 18.8 x 8.6 mm
	重さ	2.2 g	3.7 g	4.4 g	4.6 g
充電時間 ²	0%~100%		3時間		
	0%~80%		1.5時間		
	30分フィッティング		15分		
HE11 680					
最大出力音圧(OSPL90)(+3dB以下)	2 cc	128	130	133	134
最大音響利得(ピーク)(+3dB以下)	2 cc	63	68	75	78
帯域幅 (Hz)		<200 - >5000	<200 - >5000	<200 - >5000	<200 - >4600
消費電流 (mA)		2.0(+20%)		2.5(+20%)	3.3(+20%)
HE11					
最大出力音圧(OSPL90)(+3dB以下)	2 cc			139	141
最大音響利得(ピーク)(+3dB以下)	2 cc			81	84
帯域幅 (Hz)				<200 - >4900	<200 - >4600
消費電流 (mA)				3.0	3.3
スリムチューブ 4.0					
最大出力音圧(OSPL90)(+3dB以下)	2 cc	122	129		
最大音響利得(ピーク)(+3dB以下)	2 cc	58	69		
帯域幅 (Hz)		<200 - >5000	<200 - >5000		
消費電流 (mA)		2.4			

フォナック スマートスピーチ テクノロジー

フォナック スマートスピーチ テクノロジーは、様々な聞こえの環境におけることばの理解の改善と聴取努力を低減させる機能です³。当社がこれまでに開発した機能、スピーチエンハンサー・ダイナミックノイズキャンセル・モーションセンサーヒアリングがこれに含まれます。既存のロジャーダイレクト テクノロジーのメリットに加え、ルミティプラットフォームの新機能であるステレオズーム 2.0とスピーチセンサーが搭載されています。

¹ IP68は、補聴器が防水および防塵であることを示します。水深1mに長時間(60分)入れた後や粉塵試験装置に8時間入れた後でも、修理が必要なダメージが発生しないことを示しています(IEC60529規格による)。

² 実際の充電時間は、電池残量によって異なり、温度条件の影響を受ける場合があります。

³ Appleton, J. (2020) AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility. Phonak Field Study News retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed February, 2022.

Latzel, M. & Hobi, S. (2022) Receiver with mechanical vent provides benefit of open and closed acoustics for better speech understanding in noise and naturalness of own voice perception. Phonak Field Study News in preparation. Expected mid of 2022.

Thibodeau L. M. (2020) Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. Journal of the American Academy of Audiology, 31(6), 404-411.

パフォーマンスレベル

	プレミアム L90	アドバンス L70	スタンダード L50	エッセンシャル L30
オートセンス スカイ OS 5.0	プレミアム	アドバンス	スタンダード	エッセンシャル
反響する環境での快適性	●			
車の中でのことば	●			
非常に騒がしい中でのことば	●			
音楽	●	●		
騒音下での快適性	●	●	●	
騒音下でのことば	●	●	●	●
静かな環境	●	●	●	●
メディア ことば+マイク	●	●	●	●
メディア 音楽+マイク	●	●	●	●
追加プログラム				
最大プログラム数	4	4	4	4
反響する環境での快適性	●			
非常に騒がしい中でのことば	●	●		
全方向 (360°) からのことば	●	●		
騒音下でのことば	●	●	●	●
静かな環境	●	●	●	●
騒音下での快適性	●	●	●	●
音楽	●	●	●	●
電話	●	●	●	●
カスタムプログラム	●	●	●	●
電話+マイク*1	●	●	●	●
公共用のTコイル+マイク*1	●	●	●	●
ストリーミングプログラム				
ロジャーダイレクト+マイク	●	●	●	●
パートナーマイク+マイク	●	●	●	●
通話+マイク	●	●	●	●

機能

	プレミアム L90	アドバンス L70	スタンダード L50	エッセンシャル L30
スピーチセンサー	●			
スピーチエンハンサー	●			
ステレオズーム 2.0	●	●		
ダイナミックノイズキャンセル	●	●		
モーションセンサーヒアリング*2	●	●	●	
ロジャーダイレクト	●	●	●	●
ロジャーと指向性	●	●	●	●
ウルトラズーム	●	●	●	●
エコブロック	●			
タップコントロール*2				
-Siri/Google アシスタント	●	●		
-ストリーミング一時停止/再生	●	●		
-通話開始/通話終了	●	●		
ウインドブロック	●	●	●	●
サウンドリラックス	●	●		
デュオフォン	●	●	●	
リアルイヤーサウンド	●	●	●	
サウンドリカバー2	●	●	●	●
ホイッスルブロック	●	●	●	●
ノイズブロック	●	●	●	●
広帯域ブースター*3	●	●	●	●
ユーザー志向のチューニング	●	●	●	●
クイックシンク	●	●	●	●
AOV	●	●	●	●
自動順応マネージャ	●	●	●	●
環境音バランス	●	●	●	●
微調整チャンネル数	20	20	16	12

*1 PRを除く
*2 PRのみ
*3 UPのみ

ハウジングカラー

ベーシックカラー



ベージュ サンド サンダル チェスト シャンパン シルバー グラファイト
ベージュ ウッド ナット グレー グレー

こどもカラー



ベルベット ラバ ブルー マジェスティ エレクトリック カリビアン プレシャス
ブラック レッド オーシャン パープル グリーン パイレーツ ピンク

イヤフック



R1 R2 R3 R4 Q6 Q7 13
グリーン イエロー ピンク オレンジ ブルー パープル クリア


音響カプリング

			スカイ L-M/PR スカイ L-M/PR トライアル	スカイ L-SP/UP スカイ L-SP/UP トライアル
音口	イヤフック	ダンパー付き (HE 11 680)。クリア色と他6色 ダンパー無し (HE 11)。クリア色のみ	●	●
	チャイルドロック 付きフック	ダンパー付き (HE 11 680)。クリア色と他6色 ダンパー無し (HE 11)。クリア色のみ	●	●
	スリムチューブ 4.0	左右共通。5種類の長さ (00, 0, 1, 2, 3) を用意。	●	
イヤフック用 耳せん	イヤモード		●	●
	既成耳せん		●	●
スリムチューブ用 耳せん	ドーム型耳せん	キャップ型	●	
		オープン型	3種類のサイズ (S, M, L) を用意	●
		ベント付き	3種類のサイズ (S, M, L) を用意	●
		パワー型	3種類のサイズ (S, M, L) を用意	●
	スリムチップ	アクリル シリコン	● ●	

適応聴力レベル

■ DSL 小児用フィッティングレンジ

■ APD/NAL フィッティングレンジ

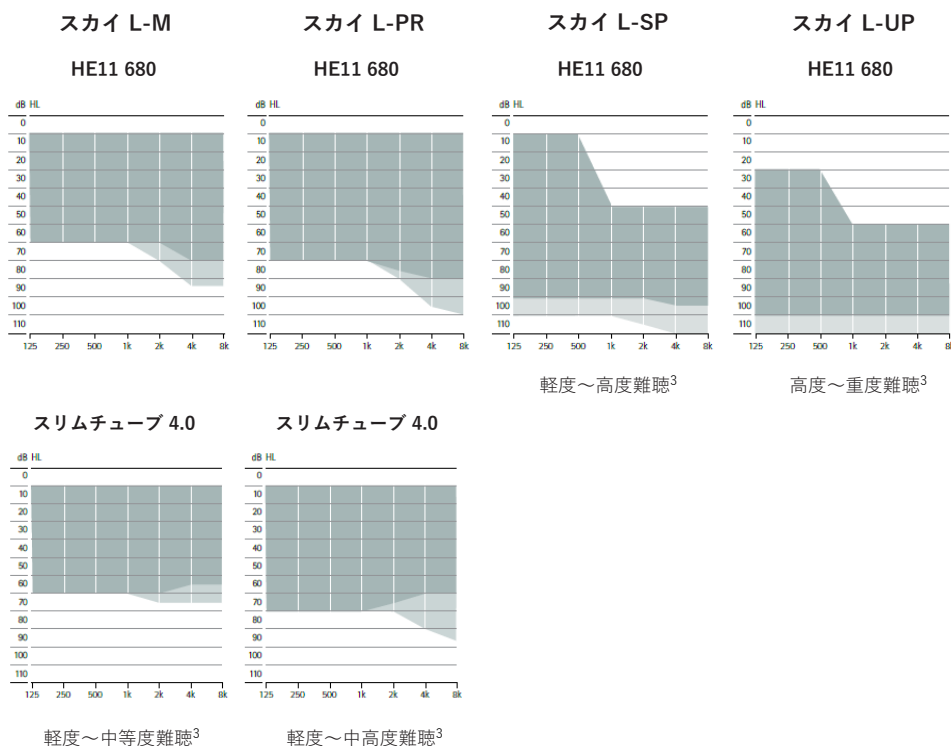

フィッティング

	スカイ L-M L90/L70/L50/L30 スカイ L-Mトライアル	スカイ L-PR L90/L70/L50/L30 スカイ L-PR トライアル	スカイ L-SP L90/L70/L50/L30 スカイ L-SPトライアル	スカイ L-UP L90/L70/L50/L30 スカイ L-UPトライアル
Phonak Target	9.1以上	9.0以上	9.1以上	9.0以上
Noahlink Wireless	●	●	●	●
Noahlink			●	●
HI-PRO/HI-PRO2			●	●

³ DSL フィッティング処方方式を使用する場合。

Bluetooth® のワード マークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。IOS は Cisco, Inc. の商標です。Android は Google, Inc. の商標です。

フォナック スカイ ルミティ 充電器



フォナック チャージャー Combi BTE /2

この充電器には、イヤモールド収納部、USB-Bの充電差込口、インジケータライトが付いています。蓄電できるパワーパック（別売）を取り付けることも可能です。



チャージャー BTE RIC

この充電器には、イヤモールド収納部、USB-Cの充電差込口、インジケータライトが付いています。

フォナック スカイ ルミティ Bluetooth® バージョン

ダイレクコール/
音声 ストリーミング

Bluetooth® 4.2のワイヤステクノロジーとおおよそ全ての旧式Bluetooth対応機器に対応

Bluetooth® のワード マークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。

ワイヤレスコミュニケーション ポートフォリオ

	スカイ L-M L90/L70/L50/L30 スカイ L-Mトライアル	スカイ L-PR L90/L70/L50/L30 スカイ L-PR トライアル	スカイ L-SP L90/L70/L50/L30 スカイ L-SP トライアル	スカイ L-UP L90/L70/L50/L30 スカイ L-UP トライアル
ワイヤレスアクセサリ				
テレビコネクターD	•	•	•	•
フォナック パートナーマイク	•	•	•	•
フォナック リモートコントロール	•	•	•	•
ロジャー				
ロジャーダイレクト	•	•	•	•
アプリ				
マイフォナック ジュニア アプリ	•	•	•	•

フォナック スカイ ルミティ トライアル

フォナック スカイ ルミティ トライアル機器は、聴覚専門家の推奨に合わせて、フィッティングソフトを使って試したいパフォーマンスレベル（クラス）に速やかに設定できます。

初回のカウンセリング時や補聴器修理中の代替品として聞こえのソリューションに合わせた選択肢を提供することができます。スカイ ルミティ トライアルには予めロジャー受信機（02）がインストールされているので、あらゆるロジャーマイクロホンを使ってロジャーのデモを行うこともできます。

詳細については、www.phonakpro.com/jp/ja/ をご覧ください。

Life is on

フォナックは1947年以来、新しい音響の世界を切り開くことによって、人々の人生を豊かにする取り組みに情熱を傾けてきました。私たちは創業当初から「良い聞こえは健康で充実したしあわせな毎日に欠かせないものである」という信念に基づき活動してきました。聞こえは、社会的・感情的、認知的、身体的なウェルビーイングに深くつながっています。私たちは、現在もそしてこれからも聴覚専門家とともに、「ことばの理解を高めること」、「人々の暮らしを豊かにすること」そして「社会全体により良い効果をもたらすこと」を大切に、革新的な聞こえのソリューションを幅広くご提供できるよう力を注いでまいります。

www.phonakpro.com/jp/ja



0459

sonova
HEAR THE WORLD



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland